

Norsk
Wear’N’Go
Legg kompresjon sleeves
Funksjon:
 Gir fast og jevn kompresjon til leggmusklene, og bidrar til å lindre ubehag, forbedre blodsirkulasjonen, støtte muskelrestitusjon og redusere risikoen for fremtidige skader. Produktet egner seg godt både til bruk under sportsaktiviteter og til restitusjon etter trening.

Bruksanvisning:

- Ta tak i produktet og trekk det forsiktig over foten og opp på leggen.
- Juster produktet slik at det sitter jevnt og dekker området fra oversiden av ankelen til undersiden av kneet. Sørg for at materialet ligger glatt uten folder.
- Når produktet skal tas av, grip tak øverst - ved området under kneet - og trekk det forsiktig nedover og av foten.

Størrelser:

- Ta mål som beskrevet på emballasjen.
- Finn riktig størrelse ved å bruke størrelsesguiden på emballasjen.

Materialer:

Se emballasjen.

Vaskeinstruksjoner:

Følg anvisningene på emballasjen.

Viktig informasjon:

- Bruk produktet med forsiktighet og på hensiktsmessig måte.
- Ikke modifierer produktet på upassende vis / Produktets funksjon må ikke endres eller svekkes.
- Må ikke brukes av personer som er overfølsomme for én eller flere av produktets komponenter.

- Produktet er ikke flammesikkert.
- Unngå temperaturer over 120°C / 248°F.
- Produktet skal kun brukes til det formålet som er beskrevet ovenfor.
- Anbefalt brukstid er maks 3–4 timer av gangen.
- Prøv produktet for å sikre at det sitter korrekt.
- Ved spørsmål om bruk, kontakt produsenten eller din lokale leverandør.
- Alle brukere anbefales å rådføre seg med helsepersonell før bruk. Idrettsutøvere bør konsultere trener, fysioterapeut eller lege før bruk.
- Bruken skal avsluttes og helsepersonell kontaktes dersom det oppstår smerter, hudirritasjoner, skader eller uvanlige reaksjoner.
- Produktet må ikke brukes direkte på åpne sår.
- Produktet er ment for personer over 18 år.
- Bruk skjer på eget ansvar.

Kasting av produktet:

Produkt og emballasje skal kastes i henhold til gjeldende lokale eller nasjonale miljøforskrifter.

Erstatningsansvar:

Produsenten fraskriver seg ansvar i følgende tilfeller:

- Produktet ikke vedlikeholdes som beskrevet i bruksanvisningen.
- Produktet er kombinert med komponenter fra andre produsenter.
- Produktet brukes utenfor anbefalte forhold, bruksområder eller miljø.
- Skader som oppstår ved feil bruk av produktet.

English
Wear’N’Go
Calf Compression Sleeves
Function:
 Provides firm and even compression to the calf muscles, helping to relieve discomfort, improve blood circulation, support muscle recovery, and reduce the risk of future injuries. Suitable for both use during sports activities and for post-exercise recovery.

Instructions for Use:

- Grasp the product and gently pull it over the foot and up the calf.
- Adjust the sleeve so that it fits evenly and covers the area from the top of the ankle to below the knee. Ensure the material lies smoothly without folds.
- To remove, grip the top – just below the knee – and carefully pull it downward and off the foot.

Sizes:

- Measure as described on the packaging.
- Find the correct size using the size guide on the packaging.

Materials:

See the packaging.

Washing Instructions:

Follow the instructions on the packaging.

Important Information:

- Use with care and appropriately.
- Do not modify or impair the product’s function.

- Not to be used by individuals sensitive to any component of the product.
- The product is not flame-resistant.
- Avoid temperatures above 120°C / 248°F.
- Use only for the purpose described above.
- Recommended usage time is a maximum of 3–4 hours at a time.
- Try the product to ensure proper fit.
- Contact the manufacturer or your local supplier for any questions.
- All users are advised to consult a healthcare professional before use. Athletes should consult a coach, physiotherapist, or physician.
- Discontinue use and consult healthcare personnel if pain, skin irritation, injuries, or unusual reactions occur.
- Do not use directly on open wounds.
- Intended for individuals over 18 years of age.
- Use at your own risk.

Disposal:

Dispose of the product and packaging in accordance with local or national environmental regulations.

Liability:

The manufacturer disclaims liability in the following cases:

- The product is not maintained as described in the instructions.
- The product is combined with components from other manufacturers.
- The product is used outside recommended conditions, applications, or environments.
- Damage occurs due to incorrect use.

Svenska

Wear’N’Go

Vadkompressionshylsor

Funktion:

Ger fast och jämn kompression till vadmusklerna, vilket hjälper till att lindra obehag, förbättra blodcirkulationen, stödja muskelåterhämtning och minska risken för framtida skador. Produkten passar både under sportaktiviteter och efter träning.

Bruksanvisning:

- Ta tag i produkten och dra den försiktigt över foten och upp på vaden.
- Justera så att hylsan sitter jämnt och täcker från ovsidan av vristen till undersidan av knäet. Se till att materialet ligger slätt utan veck.
- För att ta av produkten, greppa upptill – under knät – och dra den försiktigt neråt och av foten.

Storlekar:

- Mät enligt anvisningarna på förpackningen.
- Använd storleksguiden för att hitta rätt storlek.

Material:

Se förpackningen.

Tvättråd:

Följ anvisningarna på förpackningen.

Viktig information:

- Använd produkten försiktigt och på lämpligt sätt.
- Modifera inte produkten eller försämra dess funktion.
- Ska inte användas av personer som är överkänsliga mot någon komponent.
- Produkten är inte flamsäker.
- Undvik temperaturer över 120°C / 248°F.
- Använd endast för det beskrivna ändamålet.
- Rekommenderad användningstid är max 3–4 timmar åt gången.
- Prova produkten för att säkerställa att den sitter korrekt.
- Vid frågor, kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.
- Alla användare bör rådgöra med vårdpersonal före användning. Idrottare bör rådfråga tränare, fysioterapeut eller läkare.
- Avsluta användning och kontakta vårdpersonal vid smärta, hudirritation, skador eller ovanliga reaktioner.
- Används ej direkt på öppna sår.
- Endast avsedd för personer över 18 år.
- Användning sker på egen risk.

Avfallshantering: Produkten och förpackningen ska kasseras enligt gällande miljöföreskrifter. Ansvarskrivning: Tillverkaren ansvarar ej vid:

- Felaktigt underhåll enligt instruktion.
- Kombination med komponenter från andra tillverkare.
- Användning utanför rekommenderade förhållanden.
- Skador orsakade av felaktigt användning.

Dansk

Wear’N’Go

Lægkompressionsærmer

Funktion:

Giver fast og jævn kompression til lægmusklerne og hjælper med at lindre ubehag, forbedre blodcirkulationen, støtte muskelrestitution og reducere risikoen for fremtidige skader. Egnet til både sport og restitution efter træning.

Bruksanvisning:

- Tag fat i produktet og træk det forsigtigt over foden og op på læggen.
- Justér produktet, så det sidder jævnt og dækker området fra anklen til under knæet. Sørg for, at materialet ligger glat uden folder.
- For at fjerne det, grib øverst – lige under knæet – og træk forsigtigt nedad og af foden.

Størrelser:

- Mål som beskrevet på emballagen.
- Brug størrelsesguiden til at finde den korrekte størrelse.

Materialer:

Se emballagen.

Vaskeanvisninger:

Følg instruktionerne på emballagen.

Vigtig information:

- Brug produktet med omtanke og korrekt.
- Produktet må ikke ændres eller forringes.
- Må ikke anvendes af personer med overfølsomhed over for nogen komponent.
- Ikke flammesikkert.
- Undgå temperaturer over 120°C / 248°F.
- Kun til formålet beskrevet ovenfor.
- Anbefalet brugstid: maks. 3–4 timer ad gangen.
- Sørg for, at produktet sidder korrekt.
- Kontakt producenten eller din lokale forhandler ved spørgsmål.
- Alle brugere bør konsultere sundhedspersonale inden brug. Atleter bør spørge træner, fysioterapeut eller læge.
- Afbryd brug og kontakt sundhedspersonale ved smerter, irritation, skader eller unormale reaktioner.
- Må ikke bruges direkte på åbne sår.
- Kun til personer over 18 år.
- Anvendelse sker på eget ansvar.

Bortskaffelse:

Produkt og emballage skal bortskaffes i henhold til gældende miljøbestemmelser.

Ansvarsfraskrivelse:

Producenten fraskriver sig ansvar ved:

- Forkert vedligehold.
- Kombination med dele fra andre producenter.
- Brug uden for anbefalede rammer.
- Skader fra forkert brug.

Íslenska

Wear’N’Go

Kálfakompresserandi ermar

Virkni:

Veitir fastri og jafnvægri þrýstingu á kálfavöðva og dregur úr óþægindum, bætir blóðrás, styður endurheimt vöðva og minnkar hættu á meiðslum. Hentar við íþróttaiðkun og endurheimt eftir æfingar.

Leiðbeiningar:

- Settu ermuna varlega yfir fótinn og upp á kálfann.
- Stilltu þannig að hún hylji jafnt frá ökkla að hné. Gakktu úr skugga um að efnið liggji slétt án krumpa.
- Til að fjarlægja, taktu efst – undir hné – og dragðu varlega niður og af fæti.

Stærðir:

- Mældu samkvæmt leiðbeiningum á umbúðum.
- Veldu rétta stærð samkvæmt stærðartöflu.

Efni:

Sjáðu umbúðirnar.

Þvottaleiðbeiningar:

Fylgdu leiðbeiningum á umbúðum.

Mikilvægar upplýsingar:

- Notið með varúð og réttum hætti.
- Ekki breyta né skemma virkni vörunnar.
- Ekki ætlað þeim sem eru viðkvæmir fyrir innihaldsefnum.
- Ekki eldföst vara.
- Forðist hitastig yfir 120°C / 248°F.
- Notist aðeins samkvæmt lýsingu.
- Hámark notkunartími: 3–4 klst í senn.
- Þrófið vöruna til að tryggja rétta passun.
- Hafið samband við framleiðanda eða staðbundinn dreifingaraðila við spurningar.
- Leitið ráða hjá heilbrigðisstarfsfólki fyrir notkun.
- Hætið notkun og leitið læknis ef upp koma óþægindi eða óeðlileg viðbrögð.
- Ekki nota beint á opin sár.
- Fyrir einstaklinga eldri en 18 ára.
- Notkun er á eigin ábyrgð.

Förgun:

Fargið vöru og umbúðum samkvæmt gildandi reglum.

Ábyrgð:

Framleiðandi ber ekki ábyrgð ef:

- Varan er ekki notuð samkvæmt leiðbeiningum.
- Notuð með hlutum frá öðrum framleiðendum.
- Notuð í óviðeigandi tilgangi.
- Slys verða vegna rangrar notkunar.

Deutsch

Wear’N’Go

Waden-Kompressionsärmel

Funktion:

Bietet festen und gleichmäßigen Druck auf die Wadenmuskulatur, lindert Beschwerden, verbessert die Durchblutung, unterstützt die Muskelregeneration und verringert das Risiko zukünftiger Verletzungen. Geeignet für sportliche Aktivitäten und zur Erholung danach.

Gebrauchsanweisung:

- Das Produkt vorsichtig über den Fuß und die Wade ziehen.
- So ausrichten, dass es gleichmäßig von oberhalb des Knöchels bis unterhalb des Knies sitzt, ohne Falten im Material.
- Zum Ausziehen oben am unteren Rand des Knies greifen und vorsichtig nach unten abziehen.

Größen:

- Messen Sie laut Anleitung auf der Verpackung.
- Passende Größe mithilfe der Größentabelle finden.

Materialien:

Siehe Verpackung.

Waschanleitung:

Siehe Verpackung.

Wichtige Hinweise:

- Produkt vorsichtig und sachgemäß verwenden.
- Keine unzulässigen Änderungen vornehmen.
- Nicht geeignet für Personen mit Empfindlichkeit gegenüber Bestandteilen.
- Nicht flammhemmend.
- Temperaturen über 120°C / 248°F vermeiden.
- Nur für den angegebenen Zweck verwenden.
- Max. Tragedauer: 3–4 Stunden am Stück.
- Auf richtigen Sitz achten.
- Bei Fragen Hersteller oder Händler kontaktieren.
- Vor Gebrauch ärztlichen Rat einholen. Sportler sollten Trainer, Physio oder Arzt konsultieren.
- Bei Schmerzen, Reizungen oder ungewöhnlichen Reaktionen sofort absetzen und Arzt kontaktieren.
- Nicht direkt auf offene Wunden auftragen.
- Nur für Personen ab 18 Jahren.
- Nutzung auf eigenes Risiko.

Entsorgung:

Produkt und Verpackung gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.

Haftungsausschluss:

Keine Haftung bei:

- Nichtbeachtung der Pflegehinweise.
- Kombination mit Fremdkomponenten.
- Unsachgemäßer Nutzung oder Anwendung außerhalb des vorgesehenen Zwecks.
- Schäden durch Fehlanwendung.

Español

Wear’N’Go

Mangas de Compresión para

Pantorrillas

Función:

Proporciona compresión firme y uniforme a los músculos de la pantorrilla, alivia molestias, mejora la circulación, favorece la recuperación muscular y reduce el riesgo de lesiones. Apta para uso deportivo y recuperación post-entrenamiento.

Instrucciones:

- Coloque el producto sobre el pie y deslicelo suavemente hacia la pantorrilla.
- Asegúrese de que cubra desde el tobillo hasta debajo de la rodilla, sin pliegues.
- Para retirarlo, tome la parte superior y tire suavemente hacia abajo.

Tallas:

- Medir según indicaciones del envase.
- Usar la guía de tallas.

Materiales:

Ver el embalaje.

Lavado:

Consultar instrucciones del envase.

Información importante:

- Usar con precaución y de forma adecuada.
- No modificar el producto ni su funcionalidad.
- No usar si es alérgico a los componentes.
- No inflamable.
- Evitar temperaturas superiores a 120°C /

248°F.

- Solo para el uso indicado.
- Tiempo máximo de uso: 3–4 horas.
- Asegurar ajuste correcto.
- Consultar al fabricante o proveedor en caso de dudas.
- Consultar con personal sanitario antes de usar.
- Suspender uso y consultar al médico si se presentan molestias.
- No usar sobre heridas abiertas.
- Para mayores de 18 años.
- El uso es bajo responsabilidad del usuario.

Eliminación:

Deseche el producto y envase según normativas locales.

Responsabilidad:

El fabricante no se responsabiliza por:

- Mal mantenimiento.
- Uso con componentes de otros fabricantes.
- Uso fuera de condiciones recomendadas.
- Daños por mal uso.




AssistCo AS

Svaddevegen 125

NO-3660 Rjukan

www.assistco.no

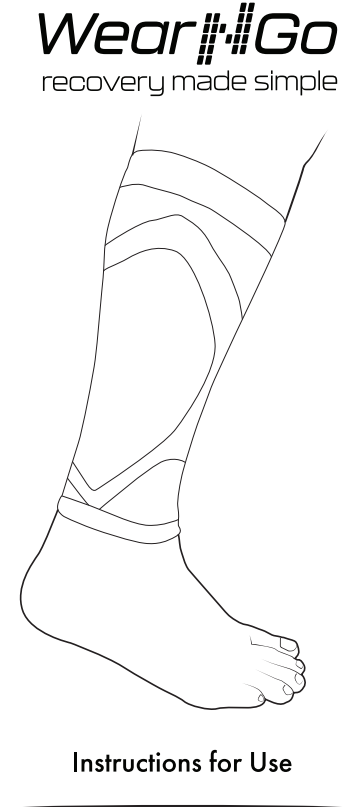

CALF COMPRESSION SLEEVES

This product is not a medical device