

Norsk Wear’N’Go Albuestøtte

Funksjon: Gir lett støtte, kompresjon, varme og stabilitet til albuen. Materialet øker blodsirkulasjonen og lindrer ubehag. Produktet egner seg godt til bruk både i idrett og ved rehabilitering etter skader eller plager.

Bruksanvisning:

- Ta tak i produktet og trekk det opp til albuen.
- Plasser produktet slik at silikonputene ligger på oversiden og undersiden av albuen. Silikonputene skal ikke dekke selve albuespissen (olecranon).
- For å ta av produktet, grip nederst på produktet og trekk det av albuen/arme

Størrelser:

- Ta mål som beskrevet på emballasjen.
- Finn riktig størrelse ved å bruke størrelsesguiden på emballasjen.

Materialer:

Se emballasjen

Vaskeinstruksjoner:

Følg anvisningene på emballasjen.

Viktig informasjon:

- Bruk produktet med forsiktighet og på hensiktsmessig måte.
- Ikke modifierer produktet på upassende vis / Produktets funksjon må ikke endres eller svekkes.
- Må ikke brukes av personer som er overfølsomme for én eller flere av produktets komponenter.
- Produktet er ikke flammesikkert.
- Unngå temperaturer over 120°C / 248°F.
- Produktet skal kun brukes til det formålet som er beskrevet ovenfor.
- Anbefalt brukstid er maks 3–4 timer av gangen.
- Prøv produktet for å sikre at det sitter korrekt.
- Ved spørsmål om bruk, kontakt produsenten eller din lokale leverandør.
- Alle brukere anbefales å rådføre seg med helsepersonell før bruk. Idrettsutøvere bør konsultere trener, fysioterapeut eller lege før bruk.
- Bruken skal avsluttes og helsepersonell kontaktes dersom det oppstår smerter, hudirritasjoner, skader eller uvanlige reaksjoner.
- Produktet må ikke brukes direkte på åpne sår.
- Produktet er ment for personer over 18 år.
- Bruk skjer på eget ansvar.

Kasting av produktet:

Produkt og emballasje skal kastes i henhold til gjeldende lokale eller nasjonale miljøforskrifter.

Erstatningsansvar:

Produsenten fraskriver seg ansvar i følgende tilfeller:

- Produktet ikke vedlikeholdes som beskrevet i bruksanvisningen.
- Produktet er kombinert med komponenter fra andre produsenter.
- Produktet brukes utenfor anbefalte forhold, bruksområder eller miljø.
- Skader som oppstår ved feil bruk av produktet.

English Wear’N’Go Elbow Support Function:

Provides light support, compression, warmth, and stability to the elbow. The material increases blood circulation and relieves discomfort. The product is well-suited for use in both sports and rehabilitation after injuries or ailments.

Instructions for Use:

- Hold the product and pull it up to the elbow.
- Position the product so that the silicone pads are placed above and below the elbow. The silicone pads should not cover the tip of the elbow (olecranon).
- To remove the product, grip the bottom and pull it off the elbow/arm.

Sizes:

- Measure as described on the packaging.
- Determine the correct size using the size guide on the packaging.

Materials:

See the packaging.

Washing Instructions: Follow the instructions on the packaging.

Important Information:

- Use the product carefully and appropriately.
- Do not modify the product inappropriately / The function must not be altered or weakened.
- Do not use if you are hypersensitive to any of the product’s components.
- The product is not flame-resistant.
- Avoid temperatures above 120°C / 248°F.
- Use only as described.

- Recommended usage time is max. 3–4 hours.
- Ensure the product fits properly.
- Contact manufacturer or local supplier if you have questions.
- Consult healthcare professionals before use. Athletes should consult a coach, physiotherapist, or doctor.
- Discontinue use and consult healthcare professionals if pain, skin irritation, injury, or unusual reactions occur.
- Do not use on open wounds.
- For use by individuals over 18 years.
- Use at your own risk.

Dispose:

Dispose of the product and packaging according to local or national environmental regulations.

Liability Disclaimer:

The manufacturer assumes no responsibility for:

- Improper maintenance.
- Use with components from other manufactur-ers.
- Use outside recommended conditions, applications, or environments.
- Injuries caused by incorrect use.

Svenska Wear’N’Go Armbågsstöd Funktion:

Ger lätt stöd, kompression, värme och stabilitet till armbågen. Materialet ökar blodcirkulationen och lindrar obehag. Produkten passar bra för idrott och rehabilitering efter skador eller besvär.

Bruksanvisning:

- Ta tag i produkten och dra upp den till armbågen.
- Placera produkten så att silikonkuddarna ligger ovanför och under armbågen. De ska inte täcka armbågsspetsen (olecranon).
- Ta av produkten genom att greppa nedtill och dra av den från armbågen/armen.

Storlekar:

- Mät enligt instruktionerna på förpackningen.
- Använd storleksguiden på förpacknin-gen.

Material:

Se förpackningen.

Tvåttråd: Följ instruktionerna på förpackningen.

Viktig information:

- Använd produkten med försiktighet och korrekt.
- Ändra inte produktens funktion eller struktur.
- Använd inte om du är överkänslig mot någon komponent.
- Produkten är inte flamsäker.
- Undvik temperaturer över 120°C / 248°F.
- Använd endast enligt beskrivningen.
- Användningstid bör inte överstiga 3–4 timmar.
- Säkerställ att produkten sitter rätt.
- Kontakta tillverkaren eller lokal leverantör vid frågor.
- Rådgör med vårdpersonal innan användning. Idrottare bör rådgöra med tränare, fysioterapeut eller läkare.
- Avbryt användning och kontakta vårdpersonal vid smärta, irritation, skada eller ovanliga reaktioner.
- Använd inte direkt på öppna sår.
- För personer över 18 år.
- Användning sker på egen risk.

Kassering:

Kassera enligt lokala eller nationella miljöföreskrifter.

Ansvarsfriskrivning:

Tillverkaren ansvarar inte för:

- Felaktigt underhåll.
- Användning med delar från andra tillverkare.
- Användning utanför rekommenderade förhållanden.
- Skador vid felanvändning.

Dansk Wear’N’Go Albuebandage

Funktion: Giver let støtte, kompression, varme og stabilitet til albuen. Materialet øger blodcirkulationen og lindrer ubehag. Velegnet til sport og genoptræning efter skader eller gener.

Brugsanvisning:

- Tag fat i produktet og træk det op til albuen.
- Placer produktet, så silikonepuderne er placeret over og under albuen. De må ikke dække selve albuespidsen (olecranon).
- For at tage produktet af, grib nederst og træk det af albuen/armen.

Størrelser:

- Mål som angivet på emballagen.
- Brug størrelsesguiden på emballagen.

Materialer:

Se emballagen.

Vaskeanvisninger:

Følg instruktionerne på emballagen.

Vigtig information:

- Brug produktet forsigtigt og korrekt.
- Produkts funktion må ikke ændres eller svækkes.
- Må ikke anvendes af personer med allergi over for nogen af komponenterne.
- Produktet er ikke flammesikkert.
- Undgå temperaturer over 120°C / 248°F.
- Må kun anvendes som beskrevet.
- Anbefalet brugstid er maks. 3–4 timer ad gangen.
- Kontroller at produktet passer korrekt.
- Kontakt producenten eller din lokale forhandler ved spørgsmål.
- Rådfør dig med sundhedspersonale før brug. Atleter bør konsultere træner, fysioterapeut eller læge.
- Afbryd brug ved smerter, hudirritation, skader eller usædvanlige reaktioner.
- Brug ikke på åbne sår.
- Til personer over 18 år.
- Brug sker på eget ansvar.

Bortskaffelse:

Produkt og emballage bortskaffes i henhold til lokale/ nationale miljøregler.

Ansvarsfraskrivelse:

Producenten fraskriver sig ansvar for:

- Manglende vedligeholdelse.
- Kombination med dele fra andre producenter.
- Brug uden for anbefalede forhold.
- Skader som følge af forkert brug.

Íslenska Wear’N’Go Ölguband Hlutverk:

Veitir léttan stuðning, þrýsting, hlýju og stöðugleika við ölboga. Efnið eykur bláðflæði og dregur úr óþægindum. Hentar við íþróttaiðkun og endurhæfingu eftir meiðsl eða verki.

Leiðbeiningar:

- Settu bandið yfir ölboga.
- Stilltu þannig að kúsilpúðar séu fyrir ofan og neðan ölboga – þeir mega ekki hylja ölbogaspissuna (olecranon).
- Til að taka það af, taktu í neðri brúnina og dragðu það af.

Stærðir:

- Mældu samkvæmt leiðbeiningum á umbúðunum.
- Veldu rétta stærð samkvæmt stærðartöflu.

Efni:

Þvottaleiðbeiningar:

Fylgdu leiðbeiningum á umbúðum.

Mikilvægt:

- Notaðu með varúð og á réttan hátt.
- EKKI breyta virkni vörunnar.
- EKKI nota ef þú ert með óhnæmi fyrir einhverjum íhlutum.
- EKKI eldföst vara.
- Forðastu hitastig yfir 120°C / 248°F.
- Nota einungis samkvæmt lýsingu.
- EKKI nota lengur en 3–4 klst í senn.
- Gakktu úr skugga um að hún passi rétt.
- Hafðu samband við framleiðanda eða dreifingaraðila ef spurningar vakna.
- Leitaðu til heilbrigðisstarfsmanna fyrir notkun. Íþróttafólk ætti að ráðfæra sig við þjálfara, sjúkrabjálfa eða lækni.
- Hættu notkun ef sársauki, erting eða önnur óvenjuleg viðbrögð koma upp.
- EKKI nota yfir opin sár.
- Fyrir fólk eldri en 18 ára.
- Á eigin ábyrgð.

Förgun:

Fargaðu samkvæmt viðeigandi reglum.

Ábyrgðarleysi:

- Framleiðandi ber ekki ábyrgð á:
- Rangri notkun eða viðhaldi.
- Notkun með hlutum frá öðrum framleiðen-dum.
- Notkun utan tilgreindra skilyrða.
- Meiðslum af völdum rangrar notkunar.

Suomi Wear’N’Go Kynnärtuki Toiminto:

Tarjoaa kevyttä tukea, kompressiota, lämpöä ja vakautta kynnärpäälle. Materiaali parantaa verenkiertoa ja lievittää epämukavuutta. Soveltuu urheiluun ja kuntoutukseen vammojen tai vaivojen jälkeen.

Käyttöohjeet:

- Vedä tuote kynnärpään kohdalle.
- Aseta silikonipehmusteet kynnärpään ylä- ja alapuolelle. Ne eivät saa peittää kynnärpään päätä (olecranon).
- Poista tuote tarttumalla alareunaan ja vetämällä pois kynnärpäästä/käsivar-resta.

Koot:

- Mittaa ohjeiden mukaan pakkauksessa.
- Valitse koko kokotaulukon perusteella.

Materiaalit:

Katso pakkausta

Pesuohteet:

Noudata pakkauksen ohjeita.

Tärkeää tietoa:

- Käytä varoen ja ohjeiden mukaan.
- Älä muuta tuotetta tai sen toimintoja.
- Ei herkille tuotteen komponenteille.
- Ei paloturvallinen.
- Vältä yli 120°C / 248°F lämpöä.
- Vain kuvattuun tarkoitukseen.
- Käyttöaika enintään 3–4 tuntia kerrallaan.
- Tarkista istuvuus ennen käyttöä.
- Ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään tarvittaessa.
- Konsultoi terveydenhuoltoa ennen käyttöä.
- Urheilijat: kysy valmentajalta/fysioterapeutilta-a/lääkäriltä.
- Lopeta käyttö ja hakeudu hoitoon oireiden tai reaktioiden yhteydessä.
- Ei avohaavoihin.
- Yli 18-vuotiaille.
- Käyttö omalla vastuulla.

Hävittäminen:

Hävitä paikallisten/julisten sääntöjen mukaan.

Vastuunrajoitus:

Valmistaja ei vastaa:

- Väärästä käytöstä tai huollosta.
- Yhdistelmästä muiden valmistajien osiin.
- Käytöstä suositusten ulkopuolella.
- Vammoista virheellisessä käytössä.

Deutsch Wear’N’Go Ellenbogenbandage Funktion:

Bietet leichte Unterstützung, Kompression, Wärme und Stabilität für den Ellenbogen. Das Material fördert die Durchblutung und lindert Beschwerden. Geeignet für Sport und Rehabilitation.

Gebrauchsanweisung:

- Ziehen Sie die Bandage bis zum Ellenbogen.
- Platzieren Sie die Silikonpolster ober- und unterhalb des Ellenbogens – nicht über dem Olecranon.
- Zum Abnehmen unten greifen und abziehen.

Größen:

- Messen Sie laut Verpackung.
- Wählen Sie die passende Größe per Größentabelle.

Materialien:

Siehe Verpackung

Waschanleitung:

Beachten Sie die Verpackungshinweise.

Wichtige Hinweise:

- Vorsichtiger und korrekter Gebrauch.
- Keine Änderungen an Funktion oder Bau.
- Nicht verwenden bei Unverträglichkeit.
- Nicht flammhemmend.
- Nicht über 120°C / 248°F.
- Nur wie beschrieben verwenden.
- Tragedauer max. 3–4 Stunden.
- Sitz vor Benutzung prüfen.
- Fragen? Hersteller oder Händler kontaktieren.
- Vorab medizinisch beraten lassen. Sportler: Trainer, Physio oder Arzt befragen.
- Bei Reaktionen: Nutzung beenden und Arzt aufsuchen.
- Nicht auf offene Wunden.
- Für über 18-Jährige.
- Nutzung auf eigene Gefahr.

Entsorgung:

Gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.

Haftungsausschluss:

Keine Haftung bei:

- Nichtbeachtung der Pflegehinweise.
- Fremdkomponenten.
- Ungeeigneter Verwendung.
- Schäden durch Fehlgebrauch.

Español Wear’N’Go Soporte de Codo Función:

Ofrece soporte ligero, compresión, calor y estabilidad al codo. Mejora la circulación y reduce molestias. Ideal para deporte y rehabilitación.

Instrucciones de uso:

- Colocar el producto sobre el codo.
- Las almohadillas deben ir encima y debajo del codo, sin cubrir el olécranon.
- Para quitarlo, tirar desde abajo.

Tallas:

- Medir como se indica en el envase.
- Consultar la guía de tallas.

Materiales:

Ver el embalaje.

Lavado:

Siga las instrucciones del envase.

Información importante:

- Usar con precaución y adecuadamente.
- No modificar la función.
- No usar si es alérgico a los componentes.
- No resistente al fuego.
- No superar 120°C / 248°F.
- Solo para el uso indicado.
- Uso recomendado: máx. 3–4 h.
- Verificar el ajuste.
- Contactar al fabricante o distribuidor.
- Consultar a un profesional sanitario antes del uso. Deportistas: entrenador, fisio o médico.
- Ante dolor o reacción, suspender y acudir al médico.
- No usar sobre heridas abiertas.
- Solo mayores de 18 años.
- Bajo propia responsabilidad.

Eliminación:

Desechar según la normativa.

Exención de responsabilidad:

No se responde por:

- Falta de mantenimiento.
- Uso con piezas externas.
- Condiciones indebidas.
- Daños por mal uso.



AssistCo AS


Svaddevegen 125

NO-3660 Rjukan

www.assistco.no

Wear’N’Go

recovery made simple

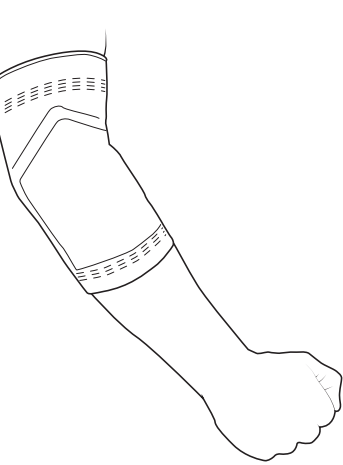

Instructions for Use

ELBOW SUPPORT

This product is not a medical device