

Norsk
Wear’N’Go
Knestøtte
Funksjon:
 Gir lett støtte, kompresjon og stabilitet til kneet. Materialet øker blodsirkulasjonen og lindrer ubehag. Produktet egner seg godt til bruk både i idrett og ved rehabilitering etter skader eller plager.

Bruksanvisning:

- Ta tak i produktet som vist i figur 1 og 2.
- Trekk produktet over kneet slik at silikonputen omslutter kneskålen, som vist i figur 3 og 4.
- For å ta av produktet, grip nederst i metallfjærene på begge sider og trekk det av kneet.

Størrelser:

- Ta mål som beskrevet på emballasjen.
- Finn riktig størrelse ved å bruke størrelsesguiden på emballasjen.

Materialer:

Se emballasjen.

Vaskeinstruksjoner:

Følg anvisningene på emballasjen.

Viktig informasjon:

- Bruk produktet med forsiktighet og på hensiktsmessig måte.
- Ikke modifier produktet på upassende vis / Produktets funksjon må ikke endres eller svekkes.
- Må ikke brukes av personer som er overfølsomme for én eller flere av produktets komponenter.
- Produktet er ikke flammesikkert.
- Unngå temperaturer over 120°C / 248°F.
- Produktet skal kun brukes til det formålet som er beskrevet ovenfor.
- Anbefalt brukstid er maks 3–4 timer av gangen.

- Prøv produktet for å sikre at det sitter korrekt.
- Ved spørsmål om bruk, kontakt produsenten eller din lokale leverandør.
- Alle brukere anbefales å rådføre seg med helsepersonell før bruk. Idrettsutøvere bør konsultere trener, fysioterapeut eller lege før bruk.
- Bruken skal avsluttes og helsepersonell kontaktes dersom det oppstår smerter, hudirritasjoner, skader eller uvanlige reaksjoner.
- Produktet må ikke brukes direkte på åpne sår.
- Produktet er ment for personer over 18 år.
- Bruk skjer på eget ansvar.

Kasting av produktet:

Produkt og emballasje skal kastes i henhold til gjeldende lokale eller nasjonale miljøforskrifter.

Erstatningsansvar:

Produsenten fraskriver seg ansvar i følgende tilfeller:

- Produktet ikke vedlikeholdes som beskrevet i bruksanvisningen.
- Produktet er kombinert med komponenter fra andre produsenter.
- Produktet brukes utenfor anbefalte forhold, bruksområder eller miljø.
- Skader som oppstår ved feil bruk av produktet.

Engelsk
Wear’N’Go
Knee Support
Function:
 Provides support, compression, and stability to the knee. The material enhances blood circulation and alleviates discomfort. The product is well-suited for use in both sports and rehabilitation after injuries or ailments.

Instructions for Use:

- Hold the product as shown in figures 1 and 2.
- Pull the product over the knee so that the silicone pad surrounds the kneecap, as shown in figures 3 and 4.
- To remove the product, grasp the bottom of the metal springs on both sides and pull it off the knee.

Sizes:

- Measure as described on the packaging.
- Determine the correct size using the size guide on the packaging.

Materials:
 See the packaging

Washing Instructions:
 Follow the instructions on the packaging.

Important Information:

- Use the product carefully and appropriately.
- Do not modify the product improperly; its function must not be altered or weakened.
- Do not use if you are sensitive to any of the product's components.
- The product is not flame-resistant.
- Avoid temperatures above 120°C / 248°F.
- Use the product only for its intended purpose

as described above.

- Do not use the product for more than 3–4 hours at a time.
- Ensure the product fits properly before use.
- If you have questions about using the product, contact the manufacturer or your local supplier.
- It is recommended to consult healthcare professionals before using the product. Athletes should consult with a coach, physiotherapist, or doctor before use.
- Discontinue use and consult healthcare professionals if you experience pain, skin irritation, injury, or unusual reactions while using the product.
- Never use the product directly over open wounds.
- The product is intended for individuals over 18 years of age.
- Use of the product is at your own risk.

Disposal:

Dispose of the product and packaging in accordance with applicable local or national environmental regulations.

Liability:

The manufacturer assumes no responsibility in the following cases:

- Products not maintained as described in the instructions.
- Products combined with components from other manufacturers.
- Products used outside recommended conditions, applications, or environments.
- Damage resulting from misuse of the product.

Svensk

Wear’N’Go
Knästöd

Funktion:

Ger stöd, kompression och stabilitet till knät. Materialet ökar blodcirkulationen och lindrar ubehag. Produkten är väl lämpad för användning både inom idrott och vid rehabilitering efter skador eller besvär.

Bruksanvisning:

- Håll i produkten som visas i figurerna 1 och 2.
- Dra produkten över knät så att silikonplattan omger knäskålen, som visas i figurerna 3 och 4.
- För att ta av produkten, greppa nederdelen av metallfjädrarna på båda sidor och dra av den från knät.

Storlekar:

- Mät enligt beskrivningen på förpackningen.
- Bestäm rätt storlek med hjälp av storleksguiden på förpackningen.

Material:

Se förpackningen

Tvättinstruktioner:

Följ anvisningarna på förpackningen.

Viktig information:

- Använd produkten försiktigt och på lämpligt sätt.
- Modifera inte produkten på olämpligt sätt; dess funktion får inte ändras eller försvagas.
- Använd inte produkten om du är känslig för någon av dess komponenter.
- Produkten är inte flamsäker.
- Undvik temperaturer över 120°C / 248°F.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet som beskrivs ovan.
- Användningstiden bör inte överstiga 3–4 timmar åt gången.
- Säkerställ att produkten sitter korrekt innan användning.
- Vid frågor om användningen av produkten, kontakta tillverkaren eller din lokala leverantör.
- Det rekommenderas att konsultera hälso- och sjukvårdspersonal innan användning. Idrottsutövare bör rådfråga tränare, fysioterapeut eller läkare före användning.
- Avbryt användningen och kontakta hälso- och sjukvårdspersonal om du upplever smärta, hudirritation, skada eller ovanliga reaktioner vid användning av produkten.
- Använd aldrig produkten direkt på öppna sår.

- Produkten är avsedd för personer över 18 år.
 - Användning av produkten sker på egen risk.
- Kassering:**
- Kassera produkten och förpackningen enligt gällande lokala eller nationella miljöföreskrifter.
- Ansvarsfriskrivning:**
- Tillverkaren tar inget ansvar i följande fall:
- Produkter som inte underhålls enligt instruktionerna.
 - Produkter som kombineras med komponenter från andra tillverkare.
 - Produkter som används utanför rekommenderade förhållanden, användningsområden eller

miljöer.

- Skador som uppstår till följd av felaktig användning av produkten.

Dansk

Wear’N’Go
Knæstøtte

Funktion:

Giver støtte, kompression og stabilitet til knæet. Materialet øger blodcirkulationen og lindrer ubehag. Produktet er velegnet til brug både i sport og ved rehabilitering efter skader eller lidelser.

Bruksanvisning:

- Hold produktet som vist i figurerne 1 og 2.
- Træk produktet over knæet, så silikonepuden omslutter knæskallen, som vist i figurene 3 og 4.
- For at fjerne produktet, grib fat i bunden af metal fjedrene på begge sider og træk det af knæet.

Størrelser:

- Mål som beskrevet på emballagen.
- Bestem den korrekte størrelse ved hjælp af størrelsesguiden på emballagen.

Materialer:

Se emballagen

Vaskeanvisninger:

Følg anvisningerne på emballagen.

Vigtig information:

- Brug produktet forsigtigt og på passende vis.
- Modificér ikke produktet upassende; dets funktion må ikke ændres eller svækkes.
- Brug ikke produktet, hvis du er følsom over for nogen af dets komponenter.
- Produktet er ikke flammeresistent.
- Undgå temperaturer over 120°C / 248°F.
- Produktet skal kun anvendes til det formål, der er beskrevet ovenfor.
- Brugtiden bør ikke overstige 3–4 timer ad gangen.
- Kontrollér, at produktet passer korrekt inden brug.
- Kontakt producenten eller din lokale leverandør ved spørgsmål om brug.
- Det anbefales, at man rådfører sig med sundhedspersonale før brug. Sportsudøvere bør konsultere trænere, fysioterapeut eller læge.
- Afbryd brugen og kontakt sundhedspersonale, hvis der opstår smerter, hudirritation, skader eller usædvanlige reaktioner ved brug.
- Brug aldrig produktet direkte på åbne sår.
- Produktet er beregnet til personer over 18 år.
- Produktet anvendes på eget ansvar.

Bortskaffelse:

Produktet og emballagen skal bortskaffes i henhold til gældende lokale eller nationale miljøregler.

Ansvarsfraskrivelse:

Producenten påtager sig intet ansvar i følgende tilfælde:

- Produkter, der ikke vedligeholdes som beskrevet i brugsanvisningen.
- Produkter, der kombineres med komponenter fra andre producenter.
- Produkter, der anvendes uden for anbefalede forhold, anvendelsesområder eller miljøer.
- Skader som følge af forkert brug af produktet.

Íslenska

Wear’N’Go

Hnéstuðningur

Hlutverk:

Veitir stuðning, þjöppun og stöðugleika fyrir hnéð. Efnið eykur blóðflæði og dregur úr óþægindum. Varan hentar vel bæði í íþróttum og við endurhæfingu eftir meiðsl eða verki.

Leiðbeiningar:

- Haltu um vöruna eins og sýnt er á myndum 1 og 2.
- Renndu vörunni yfir hnéð þannig að kispúðinn umlykur hnéskelina, eins og sýnt er á myndum 3 og 4.
- Til að taka vöruna af, dragðu hana niður með því að halda í neðri hluta málmfjáðranna á báðum hliðum.

Stærðir:

- Mældu samkvæmt leiðbeiningum á umbúðum.
- Veldu rétta stærð með því að fylgja stærðartöflunni á umbúðunum.

Efni:

Sjáðu umbúðirnar

Þvottaleiðbeiningar:

Fylgdu leiðbeiningum á umbúðum.

Mikilvægar upplýsingar:

- Notaðu vöruna með varúð og á viðeigandi hátt.
- Ekki breyta vörunni á óviðeigandi hátt; virkni hennar má ekki breytast eða veikjast.

- Ekki nota vöruna ef þú ert viðkvæm(ur) fyrir einhverju innihaldsefni hennar.
- Varan er ekki eldföst.
- Forðastu hita yfir 120°C / 248°F.
- Varan skal aðeins notuð samkvæmt þeim tilgangi sem lýst er hér að ofan.
- Ekki nota vöruna lengur en 3–4 klst í einu.
- Gakktu úr skugga um að varan passi rétt áður en þú notar hana.
- Hafðu samband við framleiðanda eða staðbundinn dreifingaraðila ef spurningar vakna.
- Mælt er með því að leita ráða hjá heilbrigðisstarfsfólki áður en varan er notuð. Íþróttafólk ætti að ráðfæra sig við þjálfara, sjúkrahjálfara eða lækni.
- Hættu notkun og leitaðu til heilbrigðisstarfsmanns ef sársauki, húðbering, meiðsl eða óvenjuleg viðbrögð koma fram.
- Ekki nota vöruna beint á opin sár.
- Varan er ætluð einstaklingum eldri en 18 ára.
- Notkun vörunnar er á eigin ábyrgð.

Förgun:

Fargaðu vöru og umbúðum samkvæmt gildandi staðbundnum eða landsreglum um umhverfismál.

Ábyrgðarleysi:

Framleiðandi ber ekki ábyrgð á eftirfarandi:

- Vörur sem eru ekki viðhaldið samkvæmt leiðbeiningum.
- Vörur sem eru samsettar með hlutum frá öðrum framleiðendum.
- Vörur sem eru notaðar utan tilgreindra skilyrða, notkunarviða eða umhverfis.
- Meiðsl sem stafa af rangri notkun vörunnar.

Español

Wear’N’Go

Soporte de Rodilla

Función:

Proporciona soporte, compresión y estabilidad a la rodilla. El material mejora la circulación sanguínea y alivia las molestias. Es ideal tanto para el deporte como para la rehabilitación después de lesiones o dolencias.

Instrucciones de uso:

- Sujete el producto como se muestra en las figuras 1 y 2.
- Coloque el producto sobre la rodilla, asegurándose de que la almohadilla de silicona rodee la rótula (figuras 3 y 4).
- Para quitarlo, tire de la parte inferior de los resortes metálicos a ambos lados y deslice el producto hacia abajo.

Tallas:

- Tome las medidas como se indica en el envase.
- Determine la talla adecuada utilizando la guía de tallas del envase.

Materiales:

Ver el embalaje.

Instrucciones de lavado:

Siga las instrucciones del envase.

Información importante:

- Use el producto con cuidado y de manera adecuada.
- No modifique el producto de forma inapropiada; no debe alterarse ni debilitarse su función.
- No usar en personas sensibles a alguno de los componentes.
- El producto no es ignífugo.
- Evite temperaturas superiores a 120°C / 248°F.
- Úselo solo para el propósito indicado anteriormente.
- No usar durante más de 3–4 horas seguidas.
- Asegúrese de que el producto se ajuste correctamente antes de usarlo.
- En caso de dudas, consulte al fabricante o a su proveedor local.
- Se recomienda consultar a un profesional sanitario antes del uso. Los deportistas deben consultar a su entrenador, fisioterapeuta o médico.
- Suspenda el uso y contacte con un profesional sanitario si aparecen dolores, irritaciones, lesiones o reacciones inusuales.
- No usar directamente sobre heridas abiertas.
- Producto destinado a personas mayores de 18 años.
- El uso es responsabilidad del usuario.

Eliminación:

Deseche el producto y el envase de acuerdo con la normativa ambiental local o nacional vigente.

Exención de responsabilidad:

El fabricante no se responsabiliza de:

- Productos no mantenidos según las instrucciones.

- Productos combinados con piezas de otros fabricantes.
- Productos usados fuera de las condiciones, usos o entornos recomendados.
- Daños derivados del uso indebido del producto.

Deutsch

Wear’N’Go

Kniebandage

Funktion:

Bietet leichte Unterstützung, Kompression und Stabilität für das Knie. Das Material fördert die Durchblutung und lindert Beschwerden. Das Produkt eignet sich sowohl für den Einsatz im Sport als auch zur Rehabilitation nach Verletzungen oder Beschwerden.

Gebrauchsanweisung:

- Greifen Sie das Produkt wie in Abbildung 1 und 2 dargestellt.
- Ziehen Sie das Produkt über das Knie, sodass das Silikonkissen die Kniescheibe umschließt, wie in Abbildung 3 und 4 gezeigt.
- Zum Abnehmen des Produkts fassen Sie unten an den Metallfedern auf beiden Seiten und ziehen es vom Knie ab.

Größen:

- Nehmen Sie Maß entsprechend den Angaben auf der Verpackung.
- Bestimmen Sie die richtige Größe mithilfe der Größentabelle auf der Verpackung.

Materialien:

Siehe Verpackung.

Waschanleitung:

Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung.

Wichtige Informationen:

- Verwenden Sie das Produkt vorsichtig und zweckmäßig.
- Nehmen Sie keine unzulässigen Veränderungen am Produkt vor / Die Funktion des Produkts darf nicht verändert oder beeinträchtigt werden.
- Nicht verwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem oder mehreren Bestandteilen des Produkts.
- Das Produkt ist nicht flammensicher.
- Temperaturen über 120°C / 248°F sind zu vermeiden.
- Das Produkt darf ausschließlich für den oben beschriebenen Verwendungszweck eingesetzt werden.
- Empfohlene maximale Tragedauer: 3–4 Stunden am Stück.
- Probieren Sie das Produkt an, um sicherzustellen, dass es korrekt sitzt.
- Bei Fragen zur Anwendung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren örtlichen Händler.
- Allen Anwendern wird empfohlen, vor der Verwendung medizinischen Rat einzuholen. Sportler sollten vor der Anwendung ihren Trainer, Physiotherapeuten oder Arzt konsultieren.
- Die Anwendung ist sofort abzubrechen und medizinisches Fachpersonal zu konsultieren, falls Schmerzen, Hautreizungen, Verletzungen oder ungewöhnliche Reaktionen auftreten.
- Das Produkt darf nicht direkt auf offenen Wunden verwendet werden.
- Das Produkt ist für Personen über 18 Jahren bestimmt.
- Die Anwendung erfolgt auf eigene Verantwortung.


Entsorgung:

Produkt und Verpackung sind gemäß den jeweils geltenden lokalen oder nationalen Umweltvorschriften zu entsorgen.

Haftungsausschluss:


Der Hersteller übernimmt keine Haftung in folgenden Fällen:

- Das Produkt wird nicht gemäß der Gebrauchsanweisung gepflegt.
- Das Produkt wird mit Komponenten anderer Hersteller kombiniert.
- Das Produkt wird außerhalb der empfohlenen Bedingungen, Anwendungsbereiche oder Umgebungen verwendet.
- Schäden entstehen infolge unsachgemäßer Verwendung des Produkts.

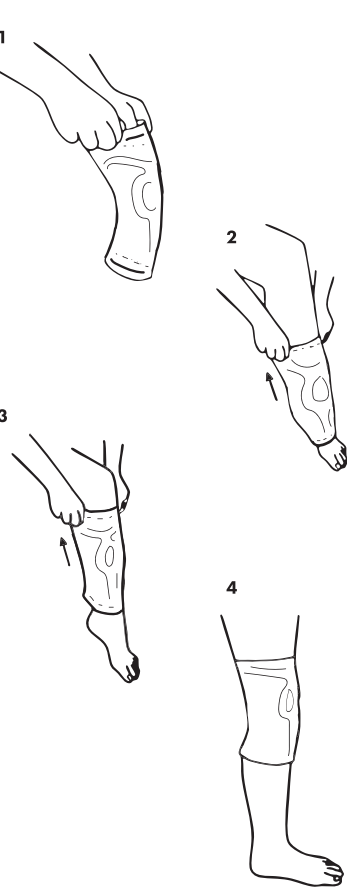

AssistCo AS
 Svaddevegen 125
 NO-3660 Rjukan

www.assistco.no

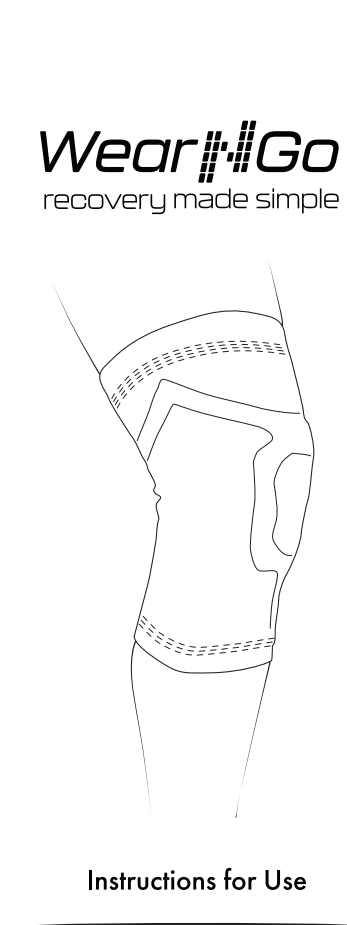

KNEE SUPPORT

This product is not a medical device